

PIXEL

Indoor-Rollator

Gebrauchsanleitung



REHASENSE



CE

Mehr als Mobilität

1 Allgemeine Informationen

Sehr geehrte Kunden

Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet die Beschreibung eines Medizingeräts und wichtige Hinweise für korrekten und sicheren Gebrauch des Produktes. Vor dem Gebrauch möchten wir Sie bitten, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen. Es ist besonders wichtig, die Sicherheitsvorschriften zu lesen und diese auch zu befolgen.

REHASENSE entwickelt kontinuierlich die eigenen Produkte und behält sich das Recht vor, technische Daten und die Funktionsweise der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an **Rehasense**. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanleitung.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung, Indikationen und Kontraindikationen

Bestimmungsgemäße Verwendung: Der Rollator ist als ein Gerät konzipiert worden, um das Gehen von Menschen mit Mobilitätsproblemen, beispielsweise beim Stehen, oder bei eigenständigem Gehen zu unterstützen. Mit dem Rollator können Menschen stehen, gehen und die meisten ihrer täglichen Aufgaben und Abläufe ohne die Hilfe anderer Personen ausführen. Jede andere Verwendung ist untersagt. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Indikationen: Dieses Gerät ist speziell für Personen vorgesehen, die aufgrund einer Vielzahl von möglichen Gesundheitsproblemen eine zusätzliche stabile Unterstützung beim Gehen benötigen.

Kontraindikationen: Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, die ernsthafte Probleme mit dem Körpergleichgewicht haben oder deren Muskelkraft zu gering ist, um alleine zu stehen und zu gehen, auch dann, wenn sie den Rollator als zusätzliche Hilfe verwenden. Die Notwendigkeit und Möglichkeit der Nutzung eines Rollators durch den Benutzer sollte immer von einem Arzt oder Physiotherapeuten beurteilt und empfohlen werden.

3 Lieferung und allgemeine Produktbeschreibung

Der Rollator wird in Kartons geliefert und ist für einfachen Transport gefaltet.

Die Verpackung enthält Folgendes:

- 1 kompletter gefalteter Rollator einschl. Korb
- 1 abnehmbares Tablett
- 1 Netztasche
- 1 Gebrauchsanleitung

Pixel ist ein Leichtgewicht-Rollator mit vier Rädern und mit einklappbarem Rahmen. Das Produkt ist aus Aluminium gefertigt, wodurch es sich leicht und einfach aufbewahren oder transportieren lässt. Der Rollator bietet enorme Wendigkeit, Stabilität und seine Schiebegriff ist höhenverstellbar, damit der Benutzer sie nach Wunsch einstellen kann. Das Produkt besteht aus einem pulverbeschichteten faltbaren Rahmen aus Aluminiumrohr und ist zudem mit einer Stoffkorb und Kunststofftablett ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglichen, kleine Gegenstände zu tragen. Der Rollator ist mit 6-Zoll-Rädern für den Einsatz im Innenbereich ausgestattet.

4 Sicherheitsanforderungen

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung von allen Personen gelesen wird, die dieses Gerät benutzen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden und/oder Verletzungen, die dadurch verursacht worden sind, dass diese Gebrauchsanleitung nicht befolgt wurde.




Gebrauchseinschränkungen

- Das Gerät darf nicht mit mehr als 110 kg belastet werden.
- Der Korb am Gerät darf nicht mit mehr als 5 kg belastet werden.
- Dieses Gerät darf nur in Innenräumen auf ebenen und glatten Untergründen verwendet werden.
- Es ist untersagt, sich auf dieses Gerät zu setzen.
- Die Bremsen MÜSSEN sich in der Verriegelungsposition befinden, BEVOR der Rollator unbeaufsichtigt belassen wird.




Vermeidung von Unfällen

- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Vermeiden Sie konstruktive Änderungen am Gerät, es sei denn, dass Sie eine schriftliche Zustimmung des Herstellers für derartige Umbauten erhalten haben.
- Während der Vornahme diverser Einstellungen, die auf diesem Gerät möglich sind, hat der Benutzer auf die Klemmgefahr der Finger oder anderer Körperteile zwischen den beiden beweglichen Elementen des Geräts zu achten.
- Das Gerät darf nur auf stabilem Untergrund verwendet werden.
- Alle Räder MÜSSEN ZU JEDEM ZEITPUNKT während des Gebrauchs Kontakt mit dem Boden haben. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rollator richtig ausbalanciert ist und Unfälle vermieden werden können.
- Beim Gebrauch des Rollators in stationärer Position MÜSSEN die Handbremsen verriegelt sein.

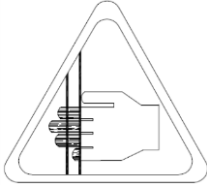 <p>Mind Your Fingers</p>	<p>Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Symbol auf dem Produkt sehen. Finger oder andere Körperteile des Benutzers und/oder eines Helfers können beim Falten- und Entfalten oder Einstellen des Geräts zwischen den Geräteteilen eingeklemmt werden. Seien Sie beim Einstellen des Geräts besonders vorsichtig. Beachten Sie die Maße der Zwischenräume zwischen den Elementen des Geräts, um das Einklemmen der Finger oder anderer Körperteile zu vermeiden.</p>
--	---

5 Angaben zum Produkt

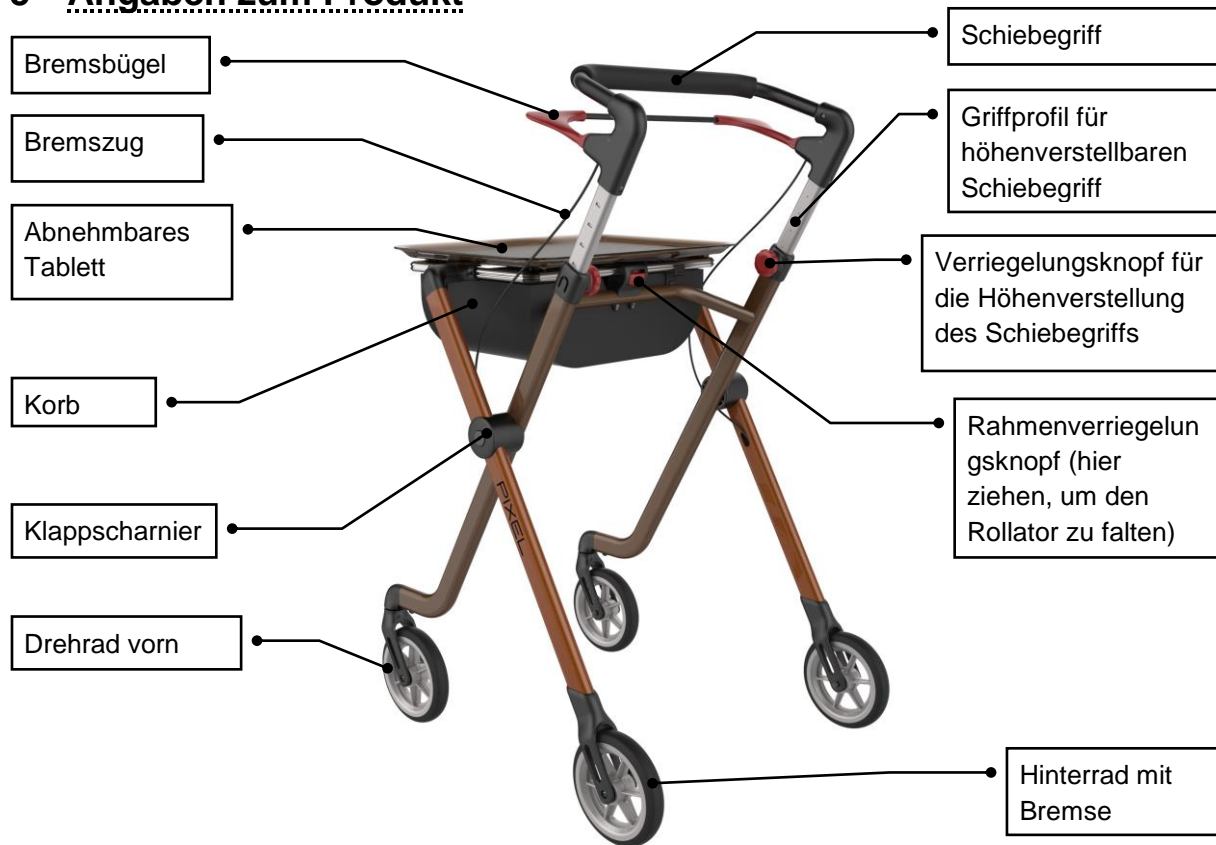

6 Gebrauch

Beim Blick auf die vorstehende Abbildung sollte sich das Gerät instinktiv zusammenbauen lassen. Allerdings möchten wir Ihnen empfehlen, folgende Schritte zu befolgen:

Erstsichtung

- Zunächst nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus und überprüfen Sie (mit Hilfe der obigen Abbildung), ob alle Teile vorhanden sind. Sollten Sie dabei feststellen, dass ein Teil fehlt oder beschädigt ist, dann bauen Sie den Rollator nicht zusammen. Kontaktieren Sie sofort den Lieferanten Ihres Produktes.

Entfalten des Rollators

- Halten Sie den Schiebegriff mit beiden Händen vor sich, so dass die Hinterräder auf dem Boden stehen. Drücken Sie den Schiebegriff nach unten, so dass der Rahmen ganz geöffnet wird.
- Finden Sie die rote Sperrtaste auf dem Rahmen des Korbes. Verriegeln Sie diese auf dem Hauptrahmen, bis Sie ein Klickgeräusch des Verriegelungsmechanismus hören.




- Versuchen Sie, die Rahmenteile zusammen zu ziehen, um den Rahmen zu falten. Ist dies nicht möglich, dann ist der Rahmen geöffnet und richtig gesichert. Schauen Sie sich die OFFENE Position in der obigen Abbildung an.



- Nach dem Entfalten oder Zusammenbau des Rollators achten Sie immer darauf, dass die Rahmenhälften sicher verriegelt sind, damit sich der Rahmen nicht mehr bewegt.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Schiebegriff im Hauptstützrohr mit den beiden Verriegelungsknöpfen sicher verriegelt ist, um ein unbeabsichtigtes Einschieben der Schiebegriffrohre zu verhindern.
- Überprüfen Sie VOR dem Gebrauch immer, dass die Zubehörteile ordnungsgemäß und sicher an Ort und Stelle verriegelt sind.
- Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Verletzungen führen.

Falten

- Drücken Sie die rote Sperrtaste, die den Rahmen des Korbes mit dem Hauptrahmen verbindet.
- Heben Sie den Rahmen des Korbes an, um die Rahmenhälften zusammenzuziehen und den Rollator zu falten.

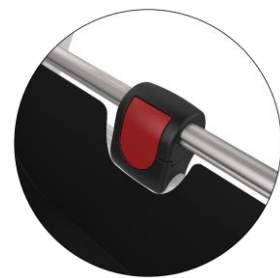

Einstellen der Höhe des Schiebegriffs

- Lösen Sie beide Verriegelungsknöpfe am Schiebegriff.
- Stellen Sie Ihre gewünschte Höhe ein.
- Ziehen Sie beide Verriegelungsknöpfe fest.



- Beide Seiten des Schiebegriffs sollten auf gleicher Höhe eingestellt sein.
- Der korrekt eingestellte Schiebegriff sollte bis zur Höhe der Hüfte des Benutzers reichen.

Gebrauch der Handbremse

- UM DEN ROLLATOR ANZUHALTEN, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben in Richtung des Schiebegriffs.
- UM STEHEN ZU BLEIBEN, halten Sie die Bremsgriffe in der oberen Position.
- UM SICH ZU BEWEGEN, lassen Sie die Bremsgriffe los. Sie werden automatisch zurückfallen und die Bremse wird gelöst.



- Sie sollten die Bremse immer dann betätigen, wenn das Gerät nicht mehr bewegt wird.
- Verlassen Sie das Gerät bei Gefälle niemals ohne betätigte Bremse!

Ver- / Entriegelung der Handbremse

- Um die Bremse zu verriegeln, drücken Sie die Bremsgriffe nach unten, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
- Um die Bremse zu entriegeln, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben, bis sie gelöst sind.



- Beim Gebrauch des Rollators in einer stationären Position MUSS die Handbremse immer verriegelt sein.

7 Reinigung

Allgemeine Informationen:

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und halten Sie es sauber.
- Leichter Schmutz und Staub lassen sich mit feuchtem Tuch entfernen.
- Größere Schmutzteile können mit einem korrosionsfreien milden Waschmittel und warmem Wasser entfernt werden.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel auf Basis von Scheuer- oder Bleichmitteln, da dies zu Schäden oder Verfärbungen führen kann.
- Trocknen Sie die Teile mit weichem Tuch ab.

Räder:

- Reinigen Sie die Räder mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie die Räder mit sauberem Lappen ab.
- Schmieren Sie die Räder mit Mehrzwecköl in regelmäßigen Abständen oder wenn diese zu quietschen beginnen.

8 Produktetikett

Das Produktetikett ist auf einem der Rohre des Hauptrahmens platziert. Es beinhaltet wichtige Informationen über das Produkt: Bezeichnung, Seriennummer, Produktionsdatum, Artikelnummer, , maximale Belastung des Korbes, Produktbreite, Maße und Herstellerangaben. Das Produktetikett darf niemals vom Gerät entfernt werden.

9 Technische Daten

Maximale Belastbarkeit	110 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	5 kg
Gesamtgewicht samt Korb	5,2 kg
Länge im geöffneten Zustand	65 cm
Höhe im gefalteten Zustand	91 cm
Breite	54 cm
Länge im gefalteten Zustand	27 cm
Höhe des Handgriffs (verstellbar)	86 – 97 cm
Bremsen	1 x Manöverbremsen auf 2 Räder mit Parkfunktion
Räder (Durchmesser x Breite)	4x 150 x 27 mm – schwarzer SOFT PU Reifen

10 Transporthinweise

Der Rollator ist ein leicht faltbares Produkt, welches sich bequem transportieren lässt. Wenn es notwendig ist, das Gerät zu transportieren, empfiehlt es sich, es zu falten, wie oben in der Beschreibung angegeben. Der Rollator sollte in stabiler Position transportiert werden und es ist sicherzustellen, dass es keine Gefahr von plötzlichen und gefährlichen Bewegungen des zu transportierenden Geräts gibt.

11 Instandhaltung

- Stellen Sie sicher, dass jedes Teil des Rollators ZU JEDEM ZEITPUNKT gesichert ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind. Wenn nicht, ziehen Sie diese bei Bedarf fest.
- Ersetzen Sie umgehend sämtliche defekte, beschädigte oder verschlissene Teile.

12 Benutzerwechsel

Der Rollator ist für den Benutzerwechsel geeignet. Vor der Weitergabe des Geräts an einen anderen Benutzer muss es durch einen Fachhändler überprüft werden.

Folgendes ist zu überprüfen:

- Sichtprüfung des Rahmens
- Sicherer Sitz von Schrauben und Muttern
- Zustand der Kunststoffteile
- Zustand der Räder und der Kugellager
- Funktionsfähigkeit und Zustand der Bremsen

Wenn eines der Teile beschädigt oder defekt ist, so muss es durch ein neues Teil ersetzt werden. Es wird empfohlen, die Räder bei jedem Benutzerwechsel zu ersetzen. Alle losen Schrauben und Muttern sind festzuziehen. Vor der Wiederverwendung muss das Produkt gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

WARNHINWEIS! Es ist untersagt, den Rollator wiederzuverwenden, wenn der Rahmen verbogen oder gebrochen ist.

Die Gebrauchsanleitung hat den Rollator bei jedem Benutzerwechsel zu begleiten.

13 Entsorgung des Produkts

Das Gerät darf nicht mit normalem Müll entsorgt werden. Es sollte bei einer Mülldeponie zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung abgegeben werden.

14 Garantie

Der Hersteller erteilt eine 2-Jahres-Garantie auf Produktionsfehler. Die Garantie gilt nicht bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts.

**Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren
Fachhändler. Sie können auch Rehasense® direkt kontaktieren.**

Fachhändler

Rehasense® Europe

Hersteller

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45

97-300 Piotrków Trybunalski

Polen

Rehasense Deutschland

Briener Straße 25

47533 Kleve

Deutschland



REHASENSE

www.rehasense.com

info@rehasense.com